



Yes, you can.®

➤ *küschall® Fusion*

La force de l'innovation pour une mobilité sans limites

Hautement configurable, le *küschall® Fusion*, réel concentré de technologie au look résolument *küschall®*, offre la possibilité de multiples réglages très simples : angle de dossier, hauteurs d'assise, roues avant, palettes, ... Son nouveau châssis rigide révolutionnaire muni d'un essieu lui confère rigidité, fonctionnalité et excellente performance de roulement.



COMPATIBLE



Le plus configurable des fauteuils

Multiples possibilités de réglages pour optimiser le positionnement dans le fauteuil, dossier réglable en tension, en inclinaison de 73,5° à 91,5°, rabattable sur l'assise et verrouillable, couleur CPS techno-anthracite en standard, nombreuses pièces carbone.



Design et Fonctionnalités

Le **küschall® Fusion**, grâce à son châssis Actif à 75° ou à son châssis Dynamic à 90°, permet le choix d'une position individualisée. La combinaison de profilés aluminium et carbone accroissent légèreté et fonctionnalités du fauteuil, et lui donnent un design inimitable !

Options



Support de tubes de direction

Nouveau design apportant légèreté et facilité de réglages.



Dossier verrouillable sur l'assise


Pour un encombrement minimum et faciliter la préhension.



Système d'aide à la propulsion Alber

Roues avec moteur intégré qui amplifie l'énergie donnée à la roue. Interchangeable avec les roues classiques.

Caractéristiques techniques

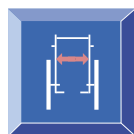


34 - 50 cm
tous les 2 cm



32 - 50 cm
tous les 2 cm




devant: 42 - 56 cm
derrière: 35 - 51 cm

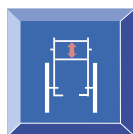


27 - 50 cm




27 - 53 cm
tous les 1 cm

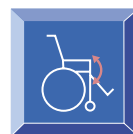

6 cm (variable)

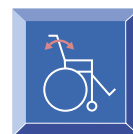


91,5° / 87° / 82,5° /
78° / 73,5°

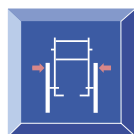

SW + 20 cm
Carrossage 0°



75° = 92 cm (prof. 40 cm)
90° = 88 cm (prof. 40 cm)

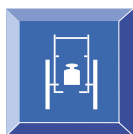

9,8 kg (SW 36 cm
en configuration
standard)



max. 140 kg



env. 7,2 kg

CE

Coloris du châssis



Rouge royal



Mystic Violet



Xantique Jaune



Bleu royal



Bleu Pacific'



CyberVert



Gris argenté



Noir bronze



Noir brillant