



Yes, you can.®

Invacare® **Spin^x** NOUVEAU

Confort et mobilité

Le fauteuil *Invacare*® **Spin^x** s'appuie sur un design ergonomique et novateur pour offrir un maximum de confort à son utilisateur. La forme du châssis, étudiée pour offrir une posture naturelle et l'assise multi-réglable permettent de trouver une position idéale pour les activités de la vie quotidienne. Conçu avec des matériaux légers et des éléments ayant fait leur preuve sur d'autres fauteuils de la gamme, le **Spin^x** combine mobilité et confort de manière durable.





➤ **Une position d'assise novatrice**

La forme spécifique de la partie arrière du châssis, des tubes d'assise et des cannes de dossier offre un espace supplémentaire au niveau du bassin. Le volume dégagé autorise un placement anatomique du bassin, gage d'une position d'assise stable et relaxante.

➤ **Un poids attractif**

L'Invacare® **Spin^x** pèse moins de 13 kg dans sa configuration la plus simple et environ 7,5 kg lorsque les parties amovibles sont enlevées.

➤ **Facile à transporter**

Un double système de pliage ! Alors que la première étape consiste en un pliage classique du croisillon le second système de pliage permet de rabattre le dossier sur l'assise. Le résultat est un incroyable fauteuil compact idéal à manipuler et à ranger.

➤ **Des composants aux qualités prouvées**

De nombreuses parties du fauteuil comme les accoudoirs, potences, poignées de pousser... utilisées pour l'Invacare® **Spin^x** sont déjà utilisées sur d'autres produits de la gamme Invacare®. Ces composants ont prouvé leur qualité et leur durée de vie, ils sont disponibles et interchangeables avec d'autres produits de la gamme. D'autres options totalement nouvelles sont disponibles pour une plus grande personnalisation.



➤ Une assise particulièrement travaillée


Le châssis d'assise a été dessiné en respectant les courbures de la colonne vertébrale, du bassin et du fémur. Les zones d'appuis sont ergonomiques et permettent une position d'assise prolongée et confortable.



Le dossier, réglable en hauteur, est courbé pour suivre la forme du tronc.




La partie postérieure possède une pente accentuée de 5° pour offrir une posture naturelle.

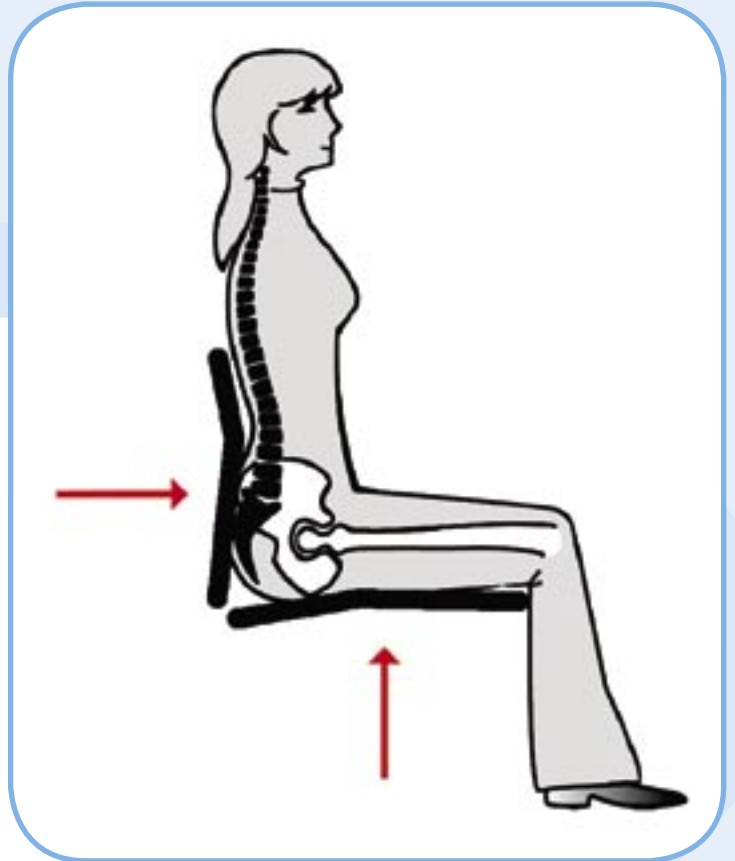

La toile d'assise est réglable en profondeur (par velcro) pour un bon ajustement de la profondeur d'assise.



Le dossier réglable en tension (option) et ses bandes velcro réglables individuellement permettent un positionnement fin.

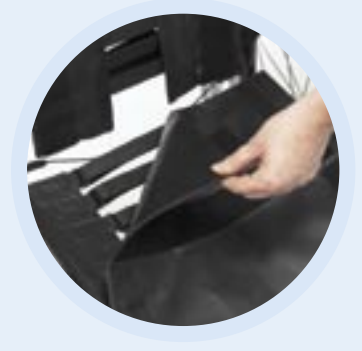

L'assise réglable en tension (option) et ses bandes velcro réglables individuellement permettent un bon positionnement du bassin.

Caractéristiques et options



Platine d'ajustement

La platine permet de régler la hauteur d'assise arrière, le centre de gravité et le carrossage à 0° ou 3°.



Croissillon intégré

Il assure la bonne rigidité du fauteuil. Les deux plus grandes largeurs d'assise ont un double croissillon.



Potences

Angle fixe 80° ou 90° Dans la couleur du châssis ou noire. Repose-jambe réglable en angle.



Dossier fixe

Réglable de 35 à 41 cm avec des poignées courtes à pousser fixes.



Toile d'assise rembourrée

Pour une utilisation sans coussin d'assise.



Toile d'assise

Réglable en profondeur sur 5 cm pour ajuster la profondeur d'assise.




Dossier réglable en angle

Amplitude de réglage : -12° à +12°.
Egalement réglable en hauteur :
36 à 40 cm ou 41 à 49 cm



Dossier rabattable


Le dossier réglable en angle est également rabattable pour faciliter le transport.

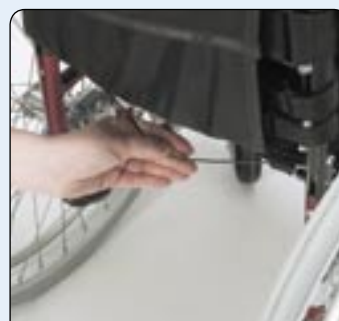

Système de déverrouillage rapide

Il permet un pliage et dépliage rapide du dossier.

Caractéristiques et options

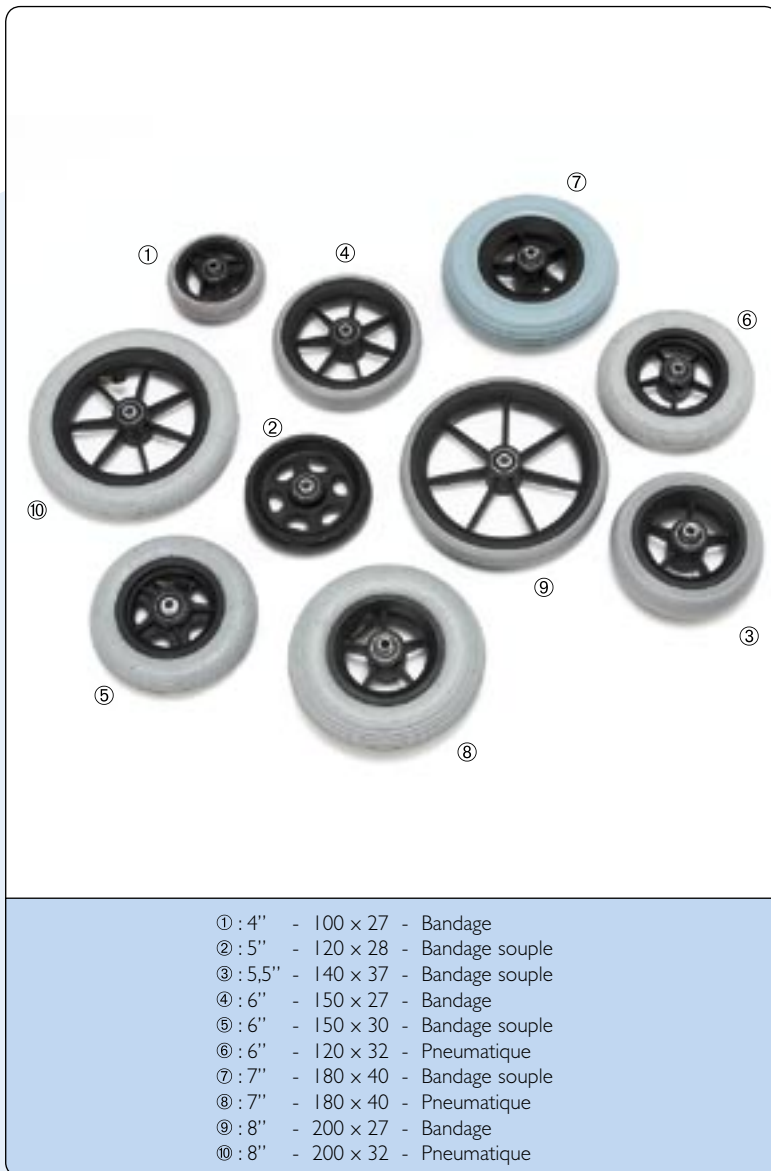

- ① : 4" - 100 x 27 - Bandage
- ② : 5" - 120 x 28 - Bandage souple
- ③ : 5,5" - 140 x 37 - Bandage souple
- ④ : 6" - 150 x 27 - Bandage
- ⑤ : 6" - 150 x 30 - Bandage souple
- ⑥ : 6" - 120 x 32 - Pneumatique
- ⑦ : 7" - 180 x 40 - Bandage souple
- ⑧ : 7" - 180 x 40 - Pneumatique
- ⑨ : 8" - 200 x 27 - Bandage
- ⑩ : 8" - 200 x 32 - Pneumatique



Roue sport
Roue avec jante fine noire, moyeu noir et pneus fins.



Roulette anti-bascule
Escamotable et réglable.



Accoudoirs
Réglables en hauteur. Relevables et amovibles ou amovibles avec manchette courte ou longue.




Protège-vêtement ou Garde-boue
Amovible et réglable en profondeur et en hauteur.



Déport de roue arrière
Pour une plus grande stabilité.

Caractéristiques techniques

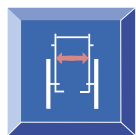


38, 40,5, 43, 45,5, 48,
50,5 cm




40 / 45 / 50
(-5 cm)



41 – 53 cm

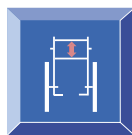

35 – 49 cm

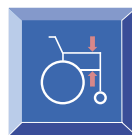

19 - 29 cm




32 - 58 cm



0° - 6°



± 12°

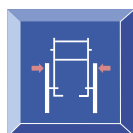


largeur d'assise
+ 22cm




76 - 113 cm



80 - 126 cm

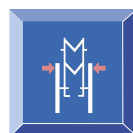

29 cm

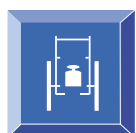

13 kg



max 125 kg



Poids de transport
7,5 kg

Coloris de châssis



Bleu



Rouge



Noir



Gris



Citron vert



Orange

Toiles



Nylon noir