



Yes, you can.[®]

Invacare[®] Tornado[®]

La mobilité sur 6 roues

Invacare[®] **Tornado[®]** fait preuve d'une agilité remarquable pour des Utilisateurs exigeants. Le système « Center Wheel Drive » permet à ce fauteuil compact de tourner sur place. Le confort est assuré par une multitude d'assises adaptées.





➤ **Rotation sur place**

L'innovation technique du « Center Wheel Drive » assure une rotation sur place car l'axe du corps se trouve identique à l'axe des roues Centrales. L'électronique Shark ou ACS REM 24SD en option couplée aux moteurs 220W permet de jouir au maximum des fonctionnalités de l'Invacare® **Tornado®**.



➤ **3 Assises au choix**

Le **Tornado** vous propose 3 assises différentes, toutes équipées en standard :

- d'une inclinaison d'assise
- d'un dossier inclinable par vérin
- d'un repose-jambes central avec appui-mollets ajustables
- d'un appui-tête

Afin d'augmenter le confort, une large gamme d'options est également disponible : lift électrique, assise électrique, repose-jambes électrique...

➤ **Une autre dimension**

La faible hauteur d'assise du **Tornado®** (38 cm avec lift) permet une accessibilité hors pair : approche d'une table, d'un bureau... Le lift électrique en X assure une excellente stabilité afin de pouvoir ajuster la hauteur de 38 cm à 68 cm.



➤ **Transferts facilités**

L'inclinaison d'assise négative combinée au repose-jambes central facilitent les transferts de face et de côté. Les palettes relevables et inclinables séparément offre une large surface d'appui pour les pieds améliorant ainsi le confort. Sur le repose-jambes électrique, les palettes se posent au sol pour faciliter les transferts.

Caractéristiques et Options



Dossier réglable par vérin pneumatique et électrique en option.



Appui-tête réglable en angle, hauteur et profondeur.



Nouvelle génération de repose-pieds et repose-jambes latéraux.



Assise réglable en inclinaison : positive pour le confort, négative pour les transferts.



Plaque d'assise réglable en largeur et profondeur.



Roues arrière compactes diminuant le rayon de giration.



Assise réglable en hauteur. Lift en "X".

Options



Assise et Dossier Standard



Assise et Dossier Kontour



Assise et Dossier Flex avec extension de dossier et appui-tête



Assise et Dossier Flex avec coussins Vicair®



Assise Inclinable en avant électrique

L'inclinaison négative à -10° facilite les transferts.



Lift Electrique en option : permet d'ajuster la hauteur d'assise de 38 cm à 68 cm ou de 45 cm à 75 cm.



Assise inclinable en arrière
Manuelle ou Electrique en option jusqu'à 35° .



Dossier inclinable
Par vérin pneumatique ou électrique.



Repose-jambes électrique en option
La palette descend manuellement au sol pour faciliter le transfert.

Caractéristiques et Options



Accoudoirs parallèles relevables

Ils suivent le dossier inclinable et sont réglables en hauteur, et profondeur.



Repose-jambes central inclinable

Manuel ou électrique en option, il procure un réel maintien des membres inférieurs. La double palette est relevable pour faciliter les transferts.



Transport dans un véhicule

4 Fixations conformes à la norme ISO 7176 (crash test)



Shark

En série avec l'assise standard.



Nouveau manipulateur REM 24SD

Obligatoire sur les assises Kontour et Flex, programmable et doté de 3 sorties externes pour contacteurs.



"Walking Beam"

Système associé au "Center Wheel Drive" permettant au **Tornado®** le franchissement de petits obstacles sans monte-trottoir en toute sécurité jusqu'à 6 cm.




Equipement route

Nécessaire pour les déplacements à l'extérieur.



Ceinture de maintien en H

Assure un bon maintien et un bon positionnement en toute sécurité.

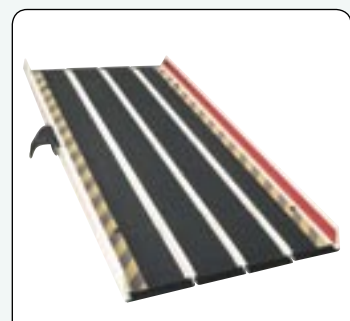

Mono rampe pliante en carbone

Disponible en pièces détachées, code 1440530
L : 200 cm, l : 82 cm,
Poids utilisateur : 300 kg,
Poids à vide : 16 kg.

Caractéristiques techniques

Standard	44 - 48 cm	41 / 46 / 51 cm	-10° - 35°*1	48 / 54 cm*2	96 cm	38 cm *3	60 - 69 cm*4
Kontour	44 - 53 cm	41 / 46 / 51 cm	-10° - 35°	64 cm*2	105 cm	38 cm *3	60 - 69 cm*4
Flex	39 - 53 cm	38 / 43 / 48 cm	-10° - 35°	55 cm*2	98 cm	38 cm *3	60 - 69 cm*4

C: 30 - 36*5 M: 36 - 42*5 L: 42 - 48*5	0° - 15° man. sans lifter 0° - 15° electr. sans lifter 0° - 35° electric 1 -10° - 35° electric 2	23 - 32 cm; 27 - 40 cm*2	110 cm*6	75 cm	125 kg*7 (Std.)	125 kg

2 x 12V 40 Ah	R = 0,6 m	6 cm	20%	2 x 220 W	8 km/h	25 km*8

- *1 pneumatique
- *2 sans coussin d'assise
- *3 sans coussin d'assise, avec lift
- *4 58 cm à la base des roues

- *5 plaque d'assise à l'arrière de la palette
- *6 incluant repose-jambe
- *7 mini sans lift
- *8 conforme à la norme ISO 7176

Toutes les mesures ont été effectuées en condition normale d'utilisation et avec les caractéristiques suivantes : Poids utilisateur : 100 kg, Batteries : 40 Ah, Moteurs : 6 km/h, Assise standard inclinée à 4°, Hauteur d'assise : 45 cm, dossier incliné à 10°

Coloris



Rouge Rubis



Bleu Nuit



Gris Aluminium