



Yes, you can.®

➤ Alber e-fix®

Kit de motorisation e-fix® E25 pour fauteuils roulants manuels

L'**Alber e-fix®** a été développé pour associer les avantages d'un fauteuil roulant manuel à ceux d'un fauteuil électrique pour une utilisation intérieure et extérieure. L'utilisateur de fauteuil manuel pourra bénéficier des grands avantages de ce concept unique de mobilité « deux en un ». Les différents éléments qui composent l' **e-fix®** sont démontables très rapidement afin de faciliter le transport.





➤ **Facilité maximale de transport**

Grâce à leur faible poids, les petits éléments offrent une possibilité inégalée de transport. Les roues motrices, le bloc de batterie et le manipulateur peuvent être enlevés en quelques secondes au moyen de fixations à démontage rapide. L'ensemble rentre dans le coffre d'une petite voiture offrant une autonomie maximale.



➤ **Parfaitement manœuvrable**

D'une très grande maniabilité l'**Alber e-fix®** est idéal pour une utilisation intérieure et extérieure. Le manipulateur programmable permet une adaptation spécifique afin de répondre aux besoins de chaque utilisateur. Les moteurs performants associés à la batterie offrent une bonne autonomie. Les roues motrices peuvent être facilement débrayées afin de retrouver les caractéristiques d'un fauteuil manuel classique.

➤ **S'adapte à presque tous les fauteuils**

Le système **e-fix®** s'adapte sur une majorité de fauteuils roulants manuels permettant de retrouver une autonomie plus importante. Les roues manuelles existantes sont interchangeables avec les roues motrices **e-fix®** permettant le fonctionnement manuel complet du fauteuil.



➤ **Simple à utiliser**

Le manipulateur ergonomique dispose de modes de conduite intérieure et extérieure actionnables par un simple bouton ainsi que de la vitesse variable. Le double affichage, grand et clair, donne des informations exactes sur l'état des roues, de la batterie et le mode de conduite. L'appui-main amovible permet un positionnement confortable.

Options et caractéristiques



Alber e-fix® prêt au transport
Les composants compacts et légers sont faciles à transporter.



Manipulateur
Grand indicateur de batterie, interrupteur intérieur/extérieur, réglage de la vitesse, avertisseur sonore.



Conduite manuelle
Débrayer le moteur et entraîner manuellement.



Batterie 12Ah
Permet une autonomie d'environ 16 km.



Chargeur
Charge complète en 5 heures.



Roue motorisée
Disponible en diamètres 22", 24".



Fixation pour fauteuil roulant
Disponible pour de nombreux fauteuils (veuillez consulter votre service clients).



Supports anti-bascule
Réglables en hauteur, angle et longueur.



Support escamotable
Manipulateur escamotable parallèlement pour un meilleur accès à la table.

Options et caractéristiques



Batterie 22 Ah

Pour une autonomie d'environ 30 km.



Commande pour tierce personne

Sur les poignées à pousser du fauteuil.



Protège-rayons

Disponible aux diamètres 22", 24".



Protection de manipulateur



Commande en T



Repose-main rallongé

Caractéristiques techniques



standard : 16 km
option : 30 km




2 x 110W




12 Ah
22 Ah



9 kg

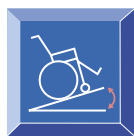

20%

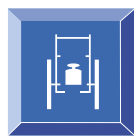

26,1kg
(1 roue 7,8 kg)



120 kg