










## Caractéristiques techniques Altitude

 largeur totale	 largeur intérieur	 hauteur accoudoir	 hauteur d'assise	 hauteur totale	 longueur totale	 profondeur siège	 hauteur dossier	 poids
67	38 40 42 44 48	23 25 27	45.47.49 51.52.53 54.55.56	119 121,5 124	112	46	75 77 79	25

Dimensions en cm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises:  $\pm 1,5$  cm et  $\pm 1,5$  kg

Le siège coquille sera fourni avec un coussin d'assise de 8 cm d'épaisseur de série (hauteur dossier 77 cm). Les hauteurs de dossiers et d'accoudoirs dépendent de l'épaisseur du coussin (6-8-10 cm). Les tailles en rouge sont disponibles sur stock.

Hauteur dossier	75	77	79
Epaisseur coussin	10	8	6
Largeur intérieur			
38	T1	<b>T2</b>	T3
40	T4	T5	T6
42	T7	T8	T9
44	T10	<b>T11</b>	T12
48	T13	<b>T14</b>	T15

La structure en acier de diamètre 32 mm et peinture époxy, lui assure une grande rigidité et une haute résistance aux agressions chimiques et mécaniques extérieures. Les 5 roues de 125 mm permettent un déplacement facile sur tous les sols intérieurs. La roue directionnelle assure un guidage parfait dans les longs déplacements.

La mousse semi-mémoire de forme au niveau de l'assise et dossier apporte un confort maximal au patient. La housse Dartex réduit fortement les problèmes liés à la transpiration.

**Votre fauteuil coquille doit s'adapter à vous . Et non l'inverse.**

Vermeiren joue depuis plus de 45 ans un rôle essentiel dans le développement de fauteuils modernes et personnalisables.

Notre principe de base est: votre fauteuil doit s'adapter à vous et non l'inverse. C'est pourquoi nous avons adopté une conception modulaire. Dans cette optique, nous avons créé une vaste gamme d'accessoires interchangeables.

### Vermeiren France S.A.

Zone Industrielle  
5, rue d'Ennevelin  
59710 Avelin

Tél.: 03 28 55 07 98  
Fax: 03 20 90 28 89

Visitez aussi notre site: [www.vermeiren.be](http://www.vermeiren.be)



# VERMEIREN

Pour plus de mobilité

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.



SIEGE COQUILLE

# Altitude

EN TOUTE SECURITE



E.R.: N.V. Vermeiren, Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgique 05/2005

Ses atouts:



Support palettes repose-pieds monté sur un ressort permettant de marcher dessus pour effectuer un transfert.

*(Palettes repose-pieds rabattables)*



Coussin de repose-jambe avec retours lateraux assisté par verin independant de l'inclinaison d'assise.

Tablette rabattable très facilement, réglable en profondeur, montée avec système à démontage rapide. Celle-ci reste toujours à l'horizontale quelque soit l'inclinaison de la coquille.




Harnais de maintien



# Altitude

-4° à +36°

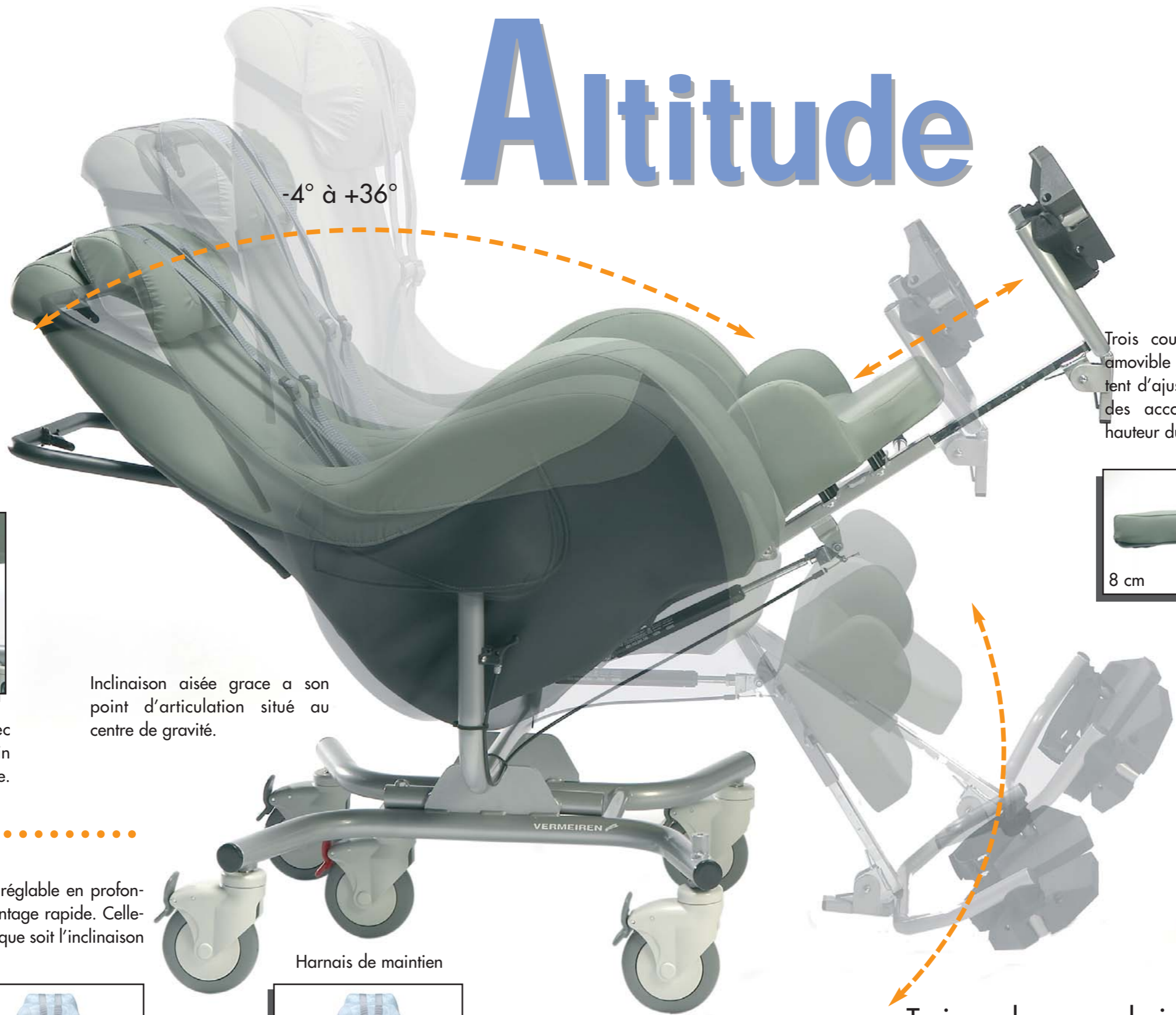

Inclinaison aisée grâce à son point d'articulation situé au centre de gravité.



Piètement 5 roulettes dont une directionnelle.

Trois coussins d'assise amovible vous permettent d'ajuster la hauteur des accoudoirs et la hauteur du dossier.



6 cm



8 cm




10 cm




3 positions du verin vous permettent de régler la hauteur d'assise de 45 à 56 cm.

Trois couleurs au choix:

DARTEX Vert

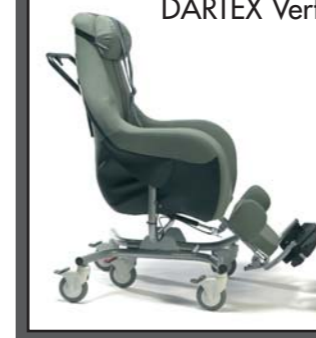

DARTEX Orange

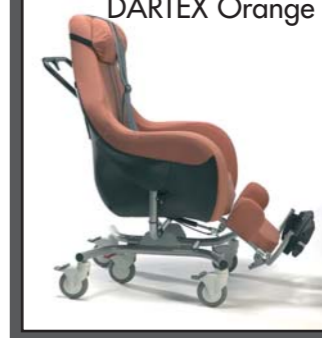

SKAI Bleu

