

Pour des patients ayant un score de Norton inférieur à 14 avec un risque élevé ou escarres de stade 2 et +



Principe

Le coussin HANDIFLOW 2, constitué d'une poche de fluide UREFLOW sur une base rigide, est spécialement conçu pour diminuer les pressions exercées sur les parties ischiatiques lors d'une assise prolongée.

Description

- Le fluide UREFLOW est un produit de haute viscosité, inerte et incompressible, enfermé sous vide dans une poche inextensible. La conception de la poche permet l'amélioration de l'immersion des parties ischiatiques et limite le phénomène de macération.
- La base rigide du coussin assure l'équilibre du patient.




Objectifs

- Augmenter la surface de contact afin de soulager les charges au niveau des ischions.



- Stabiliser le patient.

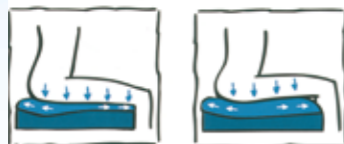

- Corriger une mauvaise posture.
- Amortir les chocs en cas de spasticité.

Avantages

- Léger
- S'adapte à toutes les morphologies.
- Manutention et entretien aisés.

Protection

Housse Waterproof, munie d'une poignée frontale.

Prescription

Dans le cas d'un patient de plus de 120 Kg
Libellé de l'ordonnance : coussin HANDIFLOW en mousse et gel, classe 1b.
Code LPP : 10274076

handitech

Pour des patients ayant un score de Norton inférieur à 14 avec un risque élevé ou escarres de stade 2 et +



Principe

Le système HANDITECH est constitué de :


- un coussin Handiflow base souple.
- 2 plots d'abduction de hauteurs différentes. Ils peuvent être découpés, poncés, flammés aisément.
- 6 cales de compensation permettant d'ajuster le positionnement des hanches et des jambes.

Destiné au positionnement

handilight

Pour des patients ayant un score de Norton inférieur à 14 avec un risque moyen ou escarre stade 1 et 2

Destiné à des patients à handicap léger

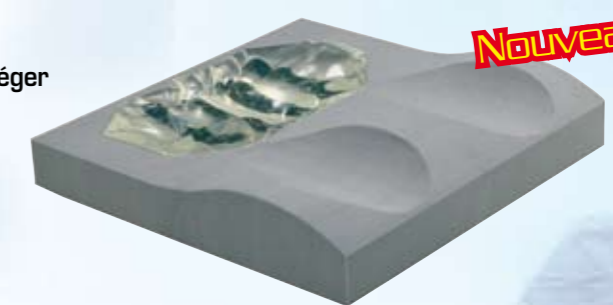

Nouveauté

Description

Le coussin HANDILIGHT est constitué d'une poche de fluide UREFLOW insérée dans une base en mousse de polyuréthane de haute portance.

Objectifs

- permettre l'immersion des ischions
- assurer une réelle efficacité de prévention
- apporter stabilité grâce à la forme ergonomique de la base du coussin

Prescription

Libellé de l'ordonnance : coussin HANDILIGHT en mousse et gel, classe 1b.
Code LPP : 1247518

Protection

Housse antidérapante waterproof munie d'une poignée frontale.



handiflow 2
coussin®

handitech

handilight®

Coussins en fluide de haute viscosité



Caractéristiques techniques des coussins

| | Handiflow2 | Handilight |
|------------------|--|---|
| Composition | Pad en fluide de haute viscosité sur une base mousse rigide thermoformée | Pad en fluide de haute viscosité sur une base mousse polyuréthane |
| Largeur | 38 - 40 - 43 - 45 cm | 38 - 40 - 43 - 45 cm |
| Profondeur | 38 - 40 - 43 - 45 cm | 38 - 40 - 43 - 45 cm |
| hauteur | 5 cm | 5 cm |
| Poids du système | < 2 Kg | < 2 Kg |
| Poids du patient | jusqu'à 180 Kg | jusqu'à 120 Kg |
| Garantie | 1 an | 1 an |

Caractéristiques techniques des housses

| | Housse |
|---------------------|---|
| Composition | Enduction polyuréthane sur trame jersey trévira 57% Polyuréthane, 43% Polyester trévira |
| Entretien | Lavage en machine jusqu'à 90°C Séchage en machine jusqu'à 90°C |
| Nettoyage quotidien | Utilisez une lotion décontaminante non chlorée ou le surface haute des laboratoires ANIOS |
| Classement au feu | M1 |

Autres produits de la gamme Handiflow line

voir fiches positionnements



Nos références

| Dimensions standards | handiflow 2 | handitech | handilight | handipose | handipose | handiflow | handipod |
|----------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 38 x 38 | NEG 0268 | NEG 0268 | NEG 0271 | | | | |
| 40 X 40 | NEG 0267 | NEG 0013 | NEG 0012 | | | | |
| 43 X 43 | NEG 0275 | NEG 0279 | NEG 0277 | NEG 0326 | NEG 0433 | NEG 0395 | NEG 0547 |
| 45 X 45 | NEG 0276 | NEG 0280 | NEG 0278 | | | | |

Distribué par



Carpenter SAS
Z.I Route de Tours - B.P.8
49490 Noyant
Tél. (33) 02 41 84 11 62 - Fax : (33) 02 41 84 11 63
E-mail : preventix@carpenter.com