

Pour des patients ayant un score de Norton supérieur ou égal à 14, avec un risque moyen ou escarre stade 1 et 2.



Principe

Le matelas **multistrates** CARSOFT3® allie les propriétés techniques de notre matelas CARSOFT2® à celle de notre mousse à mémoire de forme *Viscolux*® :


La mousse ELASTEX apporte une grande **souplesse** au support, tandis que la mousse viscoélastique garantit un grand **confort** et une réelle **immersion** du corps.

Description

- **Partie supérieure** : 4 cm de mousse viscoélastique. Surmatelas **multizones** spécialement adapté aux différentes parties du corps.



zone buste

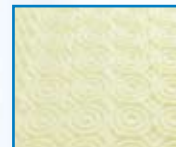

zone sacrum



zone pied

- **Partie centrale** : 3 cm de mousse ELASTEX, de très haute élasticité.



- **Partie inférieure** : 9 cm de mousse ELASTEX. La découpe en gaufrier apporte une grande **souplesse** au support et permet une meilleure **aération** du matelas. La découpe spécifique de la base du matelas permet de suivre parfaitement la cinématique du lit médicalisé.



Objectifs

- Augmenter la surface de contact et ainsi répartir et réduire les pressions au niveau des points d'appui.
- Réduire les risques de friction, de cisaillement, et de macération.
- Apporter confort et souplesse.

Protection

Le matelas CARSOFT3® est protégé par une housse intégrale CARTEX.



Notice d'installation

Le matelas CARSOFT® a un sens d'utilisation.
S'assurer que l'étiquette sur la housse soit placée dans
le sens de la lecture.

CARSOFT®
Système d'aide à la prévention
des escarres nouvelle génération

PRÉVENTIX
21 Route de Tours
BP 8 - 49490 NOYANT
Tél. 02 41 84 11 60
Fax 02 41 84 11 63

La première prévention de l'escarre est le constat à chaque d'après du corps sur le matelas en mouvement toutes les trois heures pour limiter la compression très prolongée des zones en regard des os les saillies et pour prévenir l'apparition des escarres.
Le matelas CARSOFT® est un matelas innovant qui permet d'éviter l'apparition des escarres.
Le matelas CARSOFT® est un matelas innovant qui permet d'éviter l'apparition des escarres.
Le matelas CARSOFT® est un matelas innovant qui permet d'éviter l'apparition des escarres.

La protection est lavable.
• Matelas : nettoyer le matelas avec un chiffon doux trempé dans l'eau contenant un détergent neutre.
• Housse : nettoyer la housse avec un chiffon doux trempé dans l'eau contenant un détergent neutre.
• Matelas à 100°C : ne pas utiliser d'eau chaude à l'entretien.
• Matelas à 100°C : ne pas utiliser d'eau chaude à l'entretien.
• Matelas à 100°C : ne pas utiliser d'eau chaude à l'entretien.

Utilisation fréquente de solutions lavables pour à long terme dégrader l'entretien.
Les fonctions des certifications indiquées.
Le fabricant de prévention ne sera ni dédouané en profondeur.
En cas de doute, il doit être remplacé.

Matelas du service : N° :
Carpenter - Z.I. route de Tours - 49490 NOYANT - Tél. 02 41 84 11 60 - Fax 02 41 84 11 61

Caractéristiques techniques



Mousse			
Composition	Mousse viscoélastique dite à mémoire de forme. 2 couches de mousse de polyuréthane de très haute élasticité Sans CFC Sans Chlorure de Méthylène		
	partie supérieure	partie centrale	base
Densité	50Kg/m ³	40Kg/m ³	35Kg/m ³
Portance	2.1KPa	1.8KPa	3.2KPa
Housse			
Composition	Enduction polyuréthane sur trame jersey trévira 57% Polyuréthane, 43% Polyester trévira		
Entretien	Lavage en machine jusqu'à 90°C Séchage en machine jusqu'à 90°C		
Nettoyage quotidien	Utilisez une lotion décontaminante non chlorée ou le surface haute des laboratoires ANIOS		
Classement au feu	M1		
Housse Cartex imperméable, amovible, zippée 3 côtés double rabats			

Caractéristiques du matelas

Poids du système	14 Kg
Poids du patient	jusqu'à 120 Kg
Garantie	1 an


Nos références

Dimensions	Matelas	Housse
198x86x16	327463	

Autre produit de la gamme



Revêtement Cartex

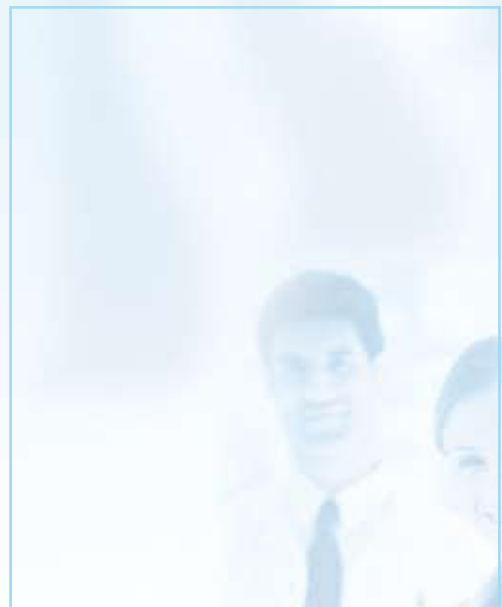

Distribué par



Carpenter SAS
Z.I. Route de Tours - B.P.8
49490 Noyant
Tél. (33) 02 41 84 11 62 - Fax : (33) 02 41 84 11 63
E-mail : preventix@carpenter.com
www.preventix.fr

