



Yes, you can.®

> Red® Clematis®

Pourquoi vous priver d'une inclinaison d'assise ?

Excellent confort, qualité et élégance qualifient le fauteuil pliant Red® **Clematis®** équipé d'une inclinaison d'assise et de dossier assistée par vérins pneumatiques. Le positionnement qu'offre le **Clematis®** procurera à l'Utilisateur une réelle sensation de détente et de bien-être.



COMPATIBLE





➤ **Coussins moelleux recouverts de Dartex®**

La garniture en Dartex® du Rea® **Clematis**® procure un grand confort aux personnes âgées passant de longues heures dans leur fauteuil. Cette sensation de confort est renforcée par le coussin d'assise bi-densité et par l'inclinaison d'assise.

➤ **Inclinaison d'assise assistée par vérin**

Equippé d'une inclinaison d'assise et de dossier négative de -1° pour faciliter les transferts frontaux à respectivement $+19^\circ$ et $+32^\circ$ pour une position presque allongée, le **Clematis**® permet d'allier confort et positionnement optimal. Il participe ainsi à l'aide à la prévention des escarres en permettant de modifier les appuis, évite le glissement vers l'avant, et dans bien des cas évite l'utilisation d'une ceinture de maintien.

➤ **Repose-jambes physiologiques**

Munis de nouveaux coussins de protection de genoux rembourrés, de nouveaux appui-mollets Grand Comfort en Dartex®, de palettes articulées réglables en angle, les repose-jambes escamotables et réglables en inclinaison du **Clematis**® offrent une compensation de la longueur de jambes et sont montés sur l'extérieur pour réduire les points de pression sur les genoux sans réduire la largeur utile.

➤ **Pliant**

Pliant, le **Clematis**® peut être aisément transporté dans un coffre de voiture. Le dossier est facilement pliant sur l'assise, les roues sont à démontage rapide.

Disponible en 3 largeurs d'assise et en 2 hauteurs sol-siège selon choix de roues 24 ou 22".





Poids de l'élément le plus lourd : 16,2 kg *
 Dimensions plié, en cm : h 59.5 x L 84 x l 58.5 *
 (* Largeur 39)




Elargisseurs d'accoudoirs
 Pour affiner le positionnement de l'Utilisateur et augmenter la largeur utile entre accoudoirs de 2 cm (soit 1 cm par côté), (accessoire, la paire)



Cale-tronc (détail)
 Sous la protection en Dartex®, 3 points d'articulation aisément accessibles pour un réglage précis



Coussins de protection de genoux
 Rembourrés au niveau de l'articulation du repose-jambe, ils offrent, avec les nouveaux appui-mollets Grand Comfort, un maintien et une protection maximale

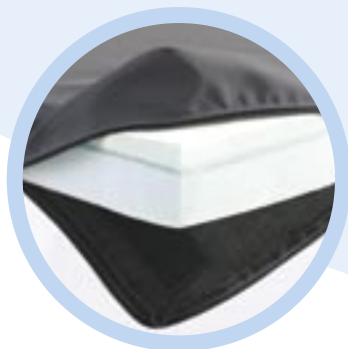

Coussin d'assise bi-densité
 Nouveau coussin avec 2 densités de mousse apportant un maximum de confort et un bon positionnement



Tube basculeur
Système anti-bascule
 Pour aider la Tierce-Personne à franchir un seuil ; pour une sécurité maximum avec le dossier et l'assise inclinés

Accessoires



Plot d'abduction



Gouttière hémiplégique


Gouttière concave réglable en hauteur et en profondeur avec système de rotation latérale indexée. (option)



Tablette

Amovible, montée sur plots fixés sur les accoudoirs (accessoire).

Caractéristiques techniques

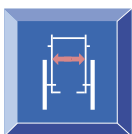


39 / 44 / 49 cm
(largeur utile) + 2 cm
avec les élargisseurs
d'accoudoirs




42 à 48 cm



40 - 45 cm*¹

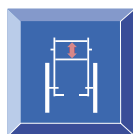

63 cm*^{2,3}

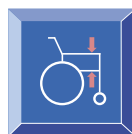


23 - 34 cm*³



30 - 43 cm
40 - 52 cm




80° - 0°

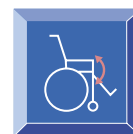


-1° - +19°



-1° - +32°

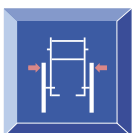

Largeur d'assise :
+ 21 cm

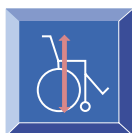

103 - 108 cm*³




112 - 148 cm



Poids de transport
16,2 / 16,5 / 16,7 kg



Dimensions de
transport plié *⁴

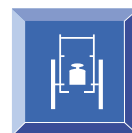

30 / 32 / 33,5 kg



max. 125 kg

* 1 : hors coussin d'assise (7 cm)

* 2 : mesuré à partir de la plaque d'assise

* 3 : excluant l'appui-tête

* 4 : largeur 39 (h 59,5 x L 84 x l 58,5 cm)

largeur 44 (h 59,5 x L 84 x l 63,5 cm)

largeur 49 (h 59,5 x L 84 x l 68,5 cm)

Positionnement et Confort : la Nouvelle Référence



Coloris du Châssis



Gris Perle

Coloris des garnitures



Dartex gris